

↑  
16mm  
+/- 2.0mm  
↓

REPÄISE

REPÄISE

**CELOX™ GRANULES**

## 15 g hemostaattisia rakeita

**Käyttötarkoitus:** tarkoitettu ensihoitajien käytettäväksi ennen sairaalaa hengenvaarallisen verenvuodon tilapäiseen hoitoon.

**Kohdepotilasryhmä:** aikuiset ja lapset, poislukien vastasyntyneet ja vauvat.

### VÄLIAIKAISEN ULKOISEN KÄYTTÖÖN



STERILE R



MD



CE

Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut

Yksittäinen steriilijärjestelmä

Lääkinnällinen laite

Käyttöohjeet takana

2797

### Käyttöohjeet:

REPÄISE


REPÄISE



1 Käytä suojakäsineitä (jos saatavilla). Revi Celox-pakkaus auki.




2 Ennen käyttöä tunnista pääverenvuoto kohta ja kohdista siihen suora painetta. Poista sitten liika veri mahdollisuuksien mukaan.

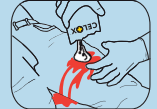

3 Kaada pussin koko sisältö heti haavaan. Täytä ihon tason yläpuolelle.



4 Paina LUIJASTI suoraan haavan päältä 5 minuutin ajan siten avulla. Jos verenvuoto jatkuu tai alkaa uudelleen, paina suoraan vielä 5 minuutin ajan. Lisäpussuja voidaan käyttää tarpeen mukaan kyseiseen haavaan tai muihin haavoihin, jotka edellyttävät kiireellistä hemostaasin käyttöä.

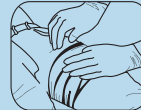

5 Kiedo ja sido sideharso tiukasti siten, että haavaan kohdistuu jatkuva paine (valmistajan ohjeiden mukaisesti).  
6 Siirrä potilas hoitopaikkaan mahdollisimman pian.  
7 Näytä tyhjä pakkaus hoitohenkilökunnalle.  
8 Hävität jäljelle jäänyt osat biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.

#### TIEDOKSI HOITOPAIKAN HENKILÖKUNNALLE:

- Tämä tuote on erittäin imukykyinen ja liukeneva hemostaatti. Tämä tuote on erittäin imukykyinen ja liukeneva hemostaatti.
- Poista geelitulppa haavasta.
  - Poista malliset rakeet ennen huuhtelua.
  - Huuhtele koko haava-alue runsaalla steriilillä keittosuolaliuoksella.
  - Jatka normaalia huuhtelua ja/tai imulla.
  - Varmista, että hemostaatti on kokonaan poistettu haavasta ennen kuin aloitat haavan hoidon.
  - Hävität irrotettu geelitulppa ja jäänteet biojätteen paikallisten vakioprotokollien mukaisesti.
- Käytön kesto:** laite ja jäänteet on poistettava haavasta 24 tunnin sisällä asettamisesta.

**Varoitukset ja varoimet:** Vain ulkoiseen käyttöön. Älä syö. Jos tuotetta on nieltävä, juo lasi vettä epämiellyttävien tunteiden välttämiseksi. Steriilinen menetykset voi aiheuttaa infektoitua. Älä steriili uudestaan. Vältä tuotteen sisäänhengittämistä. Älä levitä silmiin päälle. Jos esiintyy silmä-ärsytystä, huuhdtele vedellä 5 minuutin ajan. Säilytä lasten ulottumattomissa. Uudelleenkäyttö voi johtaa risti-infektioon ja heikentää tuotteen vaikutusta.

**Sisältää äyryistä saatavaa kitosaania - Allergiatuotimukset eivät osoita haittavaikutuksia. Asiakirja-aineisto Medtrade Products Ltd:ssä.**

**Vastaindikaatiot:** älä käytä vatsassa oleviin haavoihin tai haavoihin, joita ei voi hoitaa painamalla. Älä aseta kehon onteloihin. Laitetta ei ole tarkoitettu kirurgiseen käyttöön. Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapaukset on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenmaan päteville viranomaiselle, jossa käyttäjä ja tai potilas sijaitsee. Laitteen turvallisuuden ja klinisen suorituskyvyn tiivistelmä (SSCP) on eurooppalaisessa lääkinallisten laitteiden tietokannassa (Eudamed), missä se on linkitetty UDI-Di-perustunnitukseen. Eudamed-sivusto on <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> Basic UDI-Di-perustunnus on 506020663BP09993020037.



Medtrade Products Ltd, Electra House,  
Crewe Business Park, Crewe,  
CW1 6GL, UK.  
[www.celoxmedical.com](http://www.celoxmedical.com)

UDI

EC REP

Obelis S.A., Bd.  
Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium



**EU Importer:**  
MedEnvoy, Prinses  
Margrietplantsoen 33 –  
Suite 123, AM 2595  
The Hague, The Netherlands

REF

FG08830361  
Kuvaviite: MTP-22-2437  
Julkaisupäivä:  
10. toukokuuta 2021

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.